

INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

MODE D'EMPLOI

GEbruIKSAANWIJZING

GEBRUCHSANWEISUNG

BRUGSANVISNING



EN ONLY USE SUREGRIP RAISERS UNDER STATIC FURNITURE. WEIGHT OF FURNITURE SHOULD BE EVENLY DISTRIBUTED. IF KNOCKED CHECK TO ENSURE STABILITY. CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE. ALWAYS RAISE FURNITURE LEGS BY THE SAME HEIGHT. DO NOT USE ON UNEVEN SURFACES. TAKE CARE TO AVOID ENTRAPMENT OF FINGERS IN ADJUSTMENT SLOTS. **WARNING:** POTENTIAL TRIP HAZARD IF CROSS MEMBERS PROTRUDE OUTSIDE THE FOOTPRINT OF THE FURNITURE.



FR UTILISEZ UNIQUEMENT SUREGRIP RAISERS SOUS DES MEUBLES STATIQUES. LE POIDS DES MEUBLES DOIT ÊTRE RÉPARTI UNIFORMÉMENT. EN CAS DE CHOC, VÉRIFIEZ LA STABILITÉ. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. SOULEVEZ TOUJOURS LES PIEDS DU MEUBLE DE LA MÊME HAUTEUR. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES INÉGALES. VEILLEZ À NE PAS COINCER LES DOIGTS DANS LES FENTES DE RÉGLAGE. **AVERTISSEMENT:** RISQUE DE TRÉBUCHEMENT POTENTIEL SI LES TRAVERSES DÉPASSENT DE L'EMPREINTE DU MEUBLE.



DE VERWENDEN SIE SUREGRIP RAISERS NUR UNTER STATISCHEN MÖBELN. DAS GEWICHT DER MÖBEL SOLLTE GLEICHMÄßIG VERTEILT SEIN. WENN GEKLOFFT, AUF STABILITÄT PRÜFEN. VOR JEDEM GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. HEBEN SIE DIE MÖBELBEINE IMMER UM DIE GLEICHE HÖHE AN. NICHT AUF UNEBENEN OBERFLÄCHEN VERWENDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE FINGER NICHT IN DEN EINSTELLSCHLITZEN EINKLEMMEN. **WARNUNG:** MÖGLICHE STOLPERGEFAHR, WENN QUERTRÄGER AUßERHALB DER GRUNDFLÄCHE DER MÖBEL HERVORSTEHEN.



ES UTILICE SOLO SUREGRIP RAISERS DEBAJO DE MUEBLES ESTÁTICOS. EL PESO DE LOS MUEBLES DEBE DISTRIBUIRSE DE MANERA UNIFORME. SI SE GOLPEA, VERIFIQUE PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD. VERIFIQUE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO. SIEMPRE LEVANTE LAS PATAS DE LOS MUEBLES A LA MISMA ALTURA. NO UTILIZAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. TENGA CUIDADO DE EVITAR QUE LOS DEDOS QUEDEN ATRAPADOS EN LAS RANURAS DE AJUSTE. **ADVERTENCIA:** PELIGRO POTENCIAL DE TROPIEZO SI LOS TRAVESAÑOS SOBRESALEN DE LA HUELLA DE LOS MUEBLES.



NL GEBRUIK SUREGRIP RAISERS ALLEEN ONDER STATISCHE MEUBELS. HET GEWICHT VAN DE MEUBELS MOET GELIJKMATIG WORDEN VERDEELD. CONTROLEER BIJ KLOPPEN DE STABILITEIT. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP STABILITEIT. ZET MEUBELPOTEN ALTIJD OP DEZELFDE HOOGTE. NIET GEBRUIKEN OP ONEFFEN OPPERVLAGKEN. ZORG ERVOOR DAT UW VINGERS NIET BEKNELD RAKEN IN DE AFSTELSLEUVEN. **WAARSCHUWING:** MOGELIJK STRUIKELGEVAAR ALS DVAARSBAKKEN BUITEN DE VOETAFDruk VAN HET MEUBELAIR UITSTEKEN.



DK BRUG KUN SUREGRIP RAISERS UNDER STATISKE MØBLER. VÆGTEN AF MØBLER SKAL FORDELES JEVNT. HVIS BANKET, TJEK FOR AT SIKRE STABILITET. KONTROLLER FOR STABILITET INDEN HVER BRUG. LØFT ALTID MØBELBENENE I SAMME HØJDE. MÅ IKKE ANVENDES PÅ UJÆVNE OVERFLADER. VÆR OMHYGGELIG MED AT UNDgå FASTKLEMNING AF FINGRE I JUSTERINGSSPALTER. **ADVARSEL:** MULIG FARE FOR TRIP, HVIS TVÆRSTÆNGER STIKKER UD UDEN FOR MØBELETS FODAFTRYK.

EN If using “Raisers” on a hard floor fit the supplied three adhesive feet.

If furniture feet are 8.5cm or more use “Block Adapter” component, **follow A overleaf.** If furniture feet are less than 8.5cm, or have casters **follow B overleaf.**

To change height of “Raisers” place hand into base and turn to desired height. **Ensure all “Raisers” are the same height.**

If using “Link Arms + Spreader Bar”, first follow A or B, and then **C overleaf.** Ensure “Spreader Bar” is across the width of the furniture **not front to back - as this may cause a trip hazard.**

FR Si vous utilisez des «Raisers» sur un sol dur, installez les trois pieds adhésifs fournis.

Si les pieds des meubles mesurent 8,5 cm ou plus, utilisez le composant «Block Adapter», suivez **A au verso.** Si les pieds des meubles mesurent moins de 8,5 cm ou si les roulettes suivent **B au verso.**

Pour changer la hauteur des «Raisers», placez la main dans la base et tournez à la hauteur désirée. **Assurez-vous que tous les «Raisers» sont de la même hauteur.**

Si vous utilisez «Link Arms + Spreader Bar», suivez d'abord A ou B, puis **C au verso.** Assurez-vous que la «Spreader Bar» est sur toute la largeur du meuble **et non d'avant en arrière - car cela peut entraîner un risque de trébuchement.**

DE Wenn Sie „Raisers“ auf einem harten Boden verwenden, passen Sie die mitgelieferten drei Klebefüße an.

Wenn die Möbelfüße 8,5 cm oder mehr betragen, verwenden Sie die Komponente „Block Adapter“. Folgen Sie **A auf der Rückseite.** Wenn die Möbelfüße weniger als 8,5 cm betragen oder die Rollen **B auf der Rückseite** folgen.

Um die Höhe der „Raiser“ zu ändern, legen Sie die Hand in die

Basis und drehen Sie sie auf die gewünschte Höhe. **Stellen Sie sicher, dass alle „Raiser“ die gleiche Höhe haben.**

Wenn Sie „Link Arms + Spreader Bar“ verwenden, folgen Sie zuerst A oder B und dann **C umseitig.** Stellen Sie sicher, dass sich die „Spreader Bar“ über die Breite der Möbel und **nicht von vorne nach hinten erstreckt, da dies zu Stolperfallen führen kann.**

ES Si usa “Raisers” en un piso duro, coloque los tres pies adhesivos suministrados.

Si los pies de los muebles miden 8,5 cm o más, utilice el componente “Block Adapter”, siga **A al dorso.** Si los pies de los muebles miden menos de 8,5 cm o tienen ruedas, siga **B al dorso.**

Para cambiar la altura de los “Raisers”, coloque la mano en la base y gírela a la altura deseada. **Asegúrese de que todos los “Raisers” tengan la misma altura.**

Si usa “Link Arms + Spreader Bar”, primero siga A o B, y luego **C al dorso.** Asegúrese de que la “Spreader Bar” esté a lo ancho del mueble y **no de adelante hacia atrás, ya que esto puede causar un peligro de tropiezo.**

NL Als u “Raisers” op een harde vloer gebruikt, monteer dan de drie meegeleverde zelfklevende voetjes.

Als meubelpoten 8,5 cm of meer zijn, gebruik dan de “Block Adapter” -component, **volg A op ommezijde.** Als meubelpoten kleiner zijn dan 8,5 cm, of zwenkwielen hebben, **volg dan B op de ommezijde.**

Om de hoogte van "Raisers" te veranderen, plaatst u uw hand in de basis en draait u deze naar de gewenste hoogte. **Zorg ervoor dat alle "Raisers" dezelfde hoogte hebben.**

Als u "Link Arms + Spreader Bar" gebruikt, volg dan eerst A of B en dan **C aan de ommezijde.** Zorg ervoor dat de "Spreader Bar" over de breedte van het meubelstuk loopt, **niet van voren naar achteren - dit kan struikelen veroorzaken.**

DK Hvis du bruger “Raisers” på et hårdt gulv, skal de

medfølgende tre klæbende fødder monteres.

Hvis møbelfødder er 8,5 cm eller mere, skal du bruge komponenten "Blokadapter", **så følg A på forsiden.** Hvis møbelfødder er mindre end 8,5 cm, eller hvis hjul har hjul, skal du **følge B på næste side.**

For at ændre højden på “Raisers” skal du placere hånden i basen og dreje til ønsket højde. **Sørg for, at alle "Raisers" har samme højde.**

Hvis du bruger “Link Arms + Spreader Bar”, skal du først følge A eller B og derefter **C på næste side.** Sørg for, at "Spredetang" er på tværs af møblets bredde, **ikke for- og bagud - da dette kan medføre fare for udløsning.**



CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
REINIGUNGSANWEISUNGEN
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
SCHOONMAAK INSTRUCTIES
RENGØRINGSINSTRUKTIONER



PH 5 - 9



WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER
ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE
MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN
LIMPIE CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA JABONOSA.
VEEG AF MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN EEN SOPJE
AFTØR MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](#)
 [@EllisHealthcare](#)



LANGHAM SUREGRIP®

FURNITURE RAISERS

LINK ARMS + SPREADER BAR

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
EN FR DE ES NL DK



MAXIMUM LOAD
PER SET OF 4
POIDS MAXIMUM
PAR LOT DE 4
PESO MÁXIMO
POR JUEGO DE 4

MAXIMALES GEWICHT
PRO 4ER-SET
MAXIMAAL GEWICHT
PER SET VAN 4
MAKSIMAL BELASTNING
PR. SÆT PÅ 4



EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW
FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS
DE JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN
ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN
NL ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER
DK ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC REP - KONTAKTOPLYSNINGER OVER BLAD




FURNITURE RAISER

60570




BLOCK ADAPTER

WITH ADHESIVE PAD

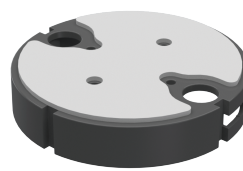

LINK ARM

60571

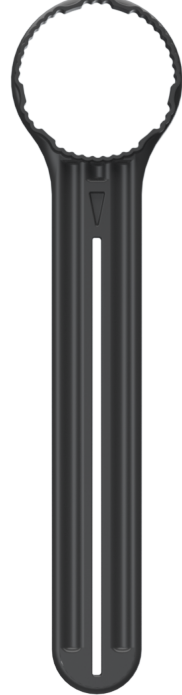

SPREADER BAR

60572



DESIGNED IN THE UK



MD

IFU-REF

60570/0523-1

GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

REF

60570 + 60571 + 60572

EC REP

MADE IN CHINA





AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK




 [gordonellis.healthcare](#)
 [@EllisHealthcare](#)







A BLOCK ADAPTER WITH ADHESIVE PAD

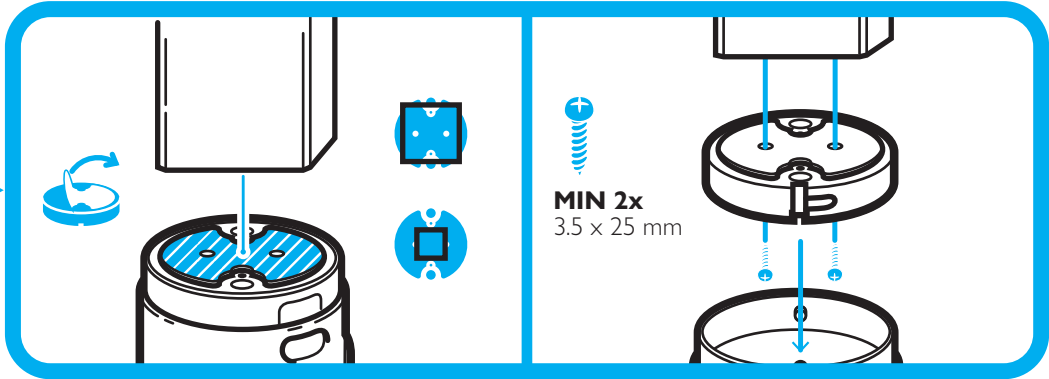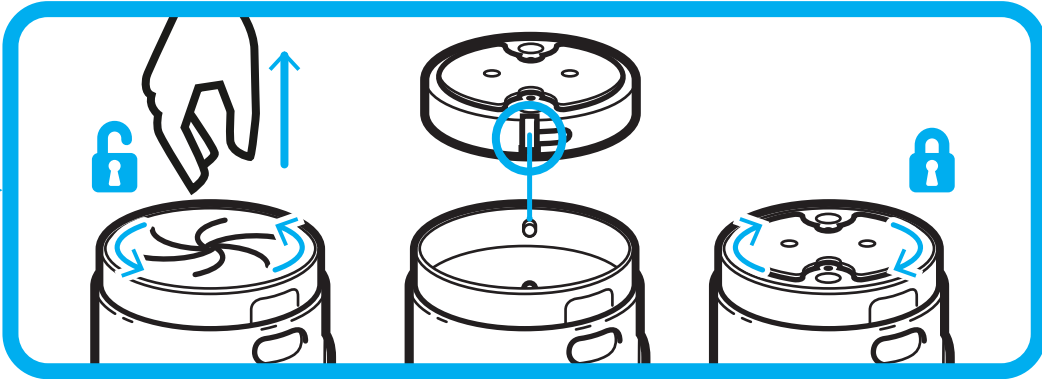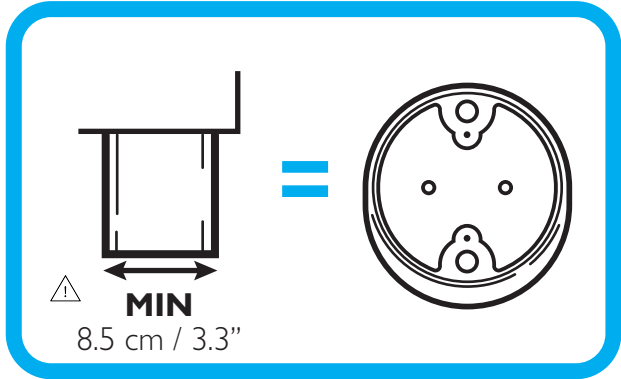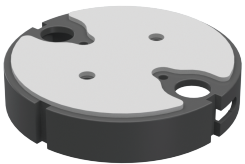

B FURNITURE RAISER 60570

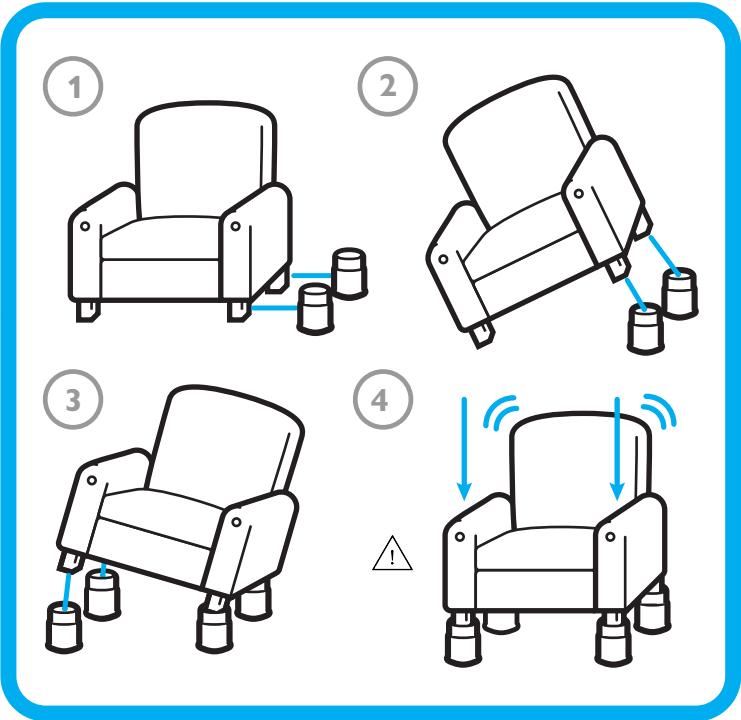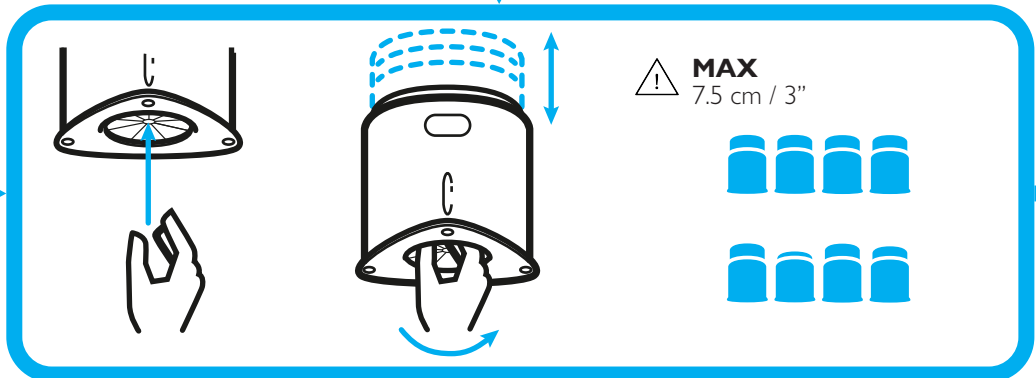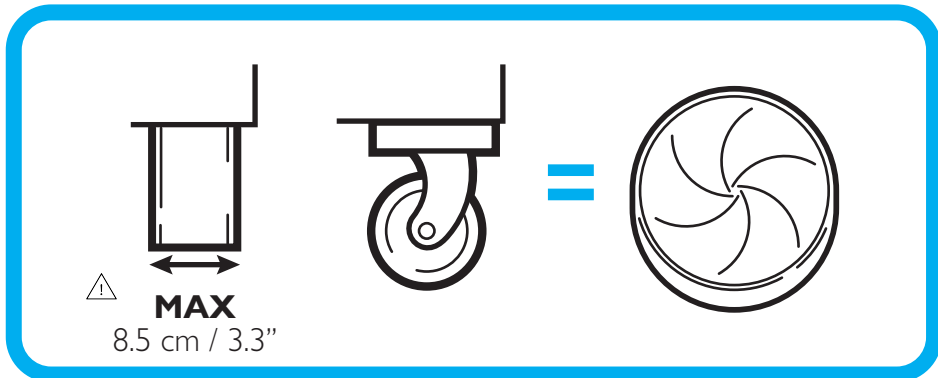

C LINK ARM + SPREADER BAR 60571 + 60572

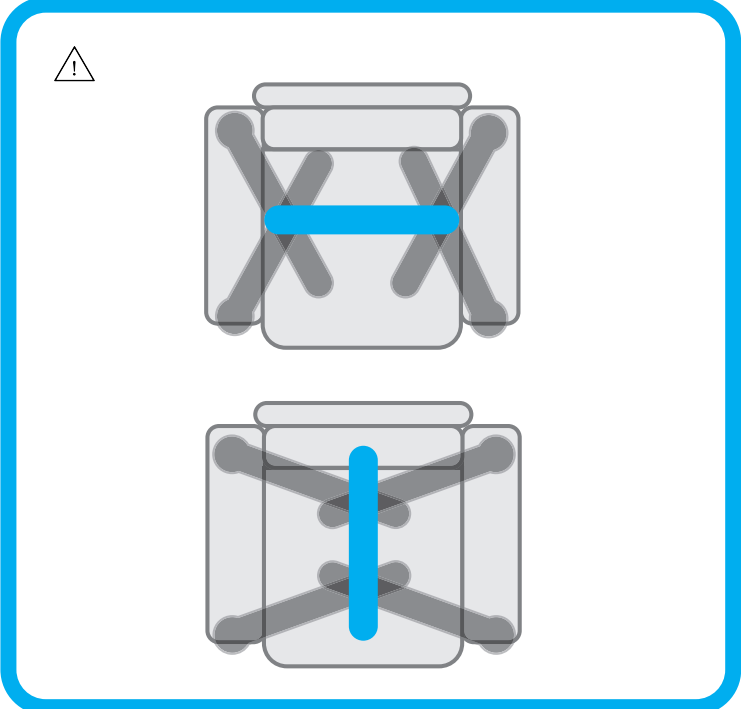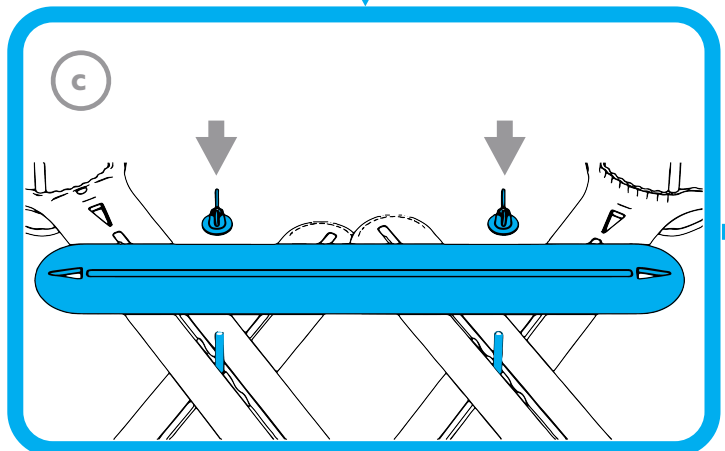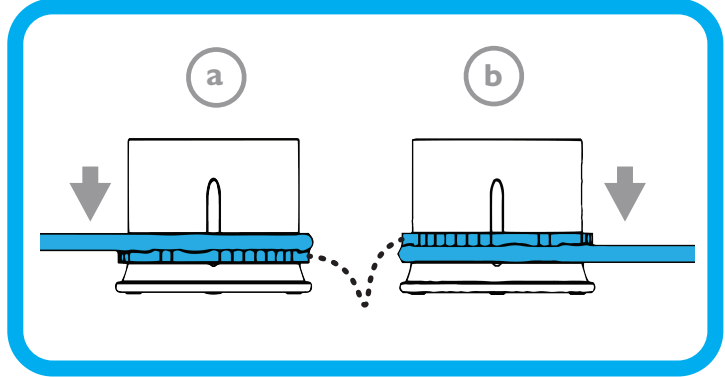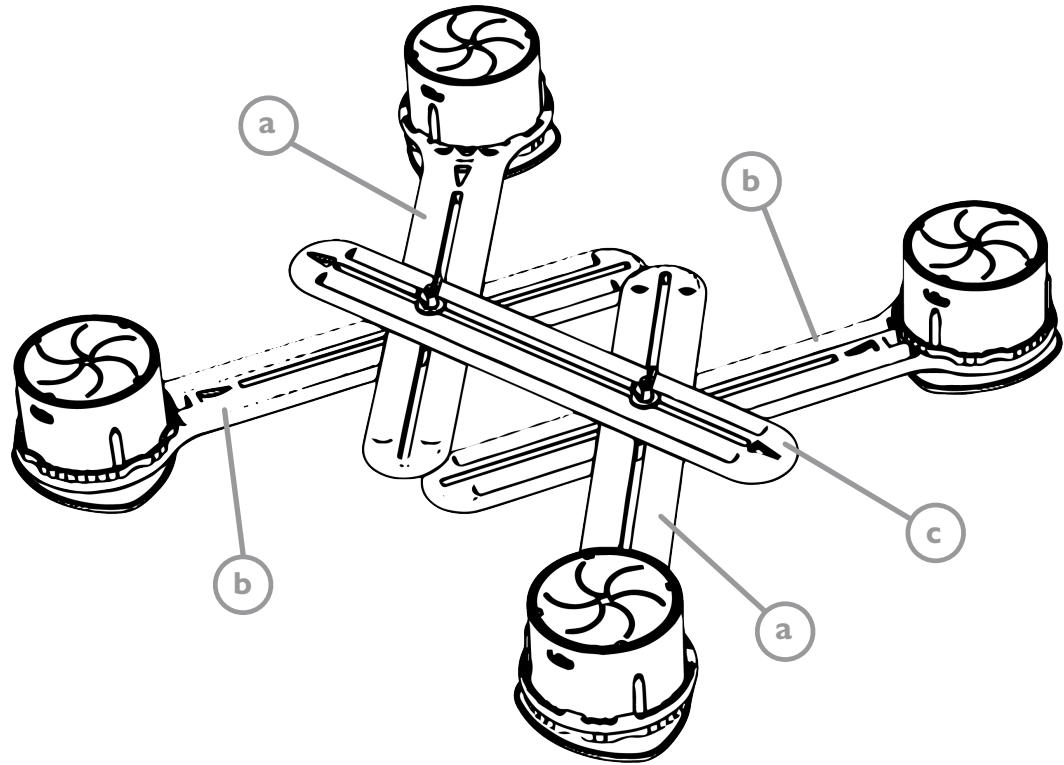

FOR FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE A VIDEO CAN BE VIEWED BY SCANNING THE QR CODE, OR VISITING:
POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS, UNE VIDÉO PEUT ÊTRE VISIONNÉE EN SCANNANT LE CODE QR OU EN VISITANT:
FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND ANLEITUNGEN KANN EIN VIDEO DURCH SCANNEN DES QR-CODES ODER DURCH BESUCHEN VON:
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, PUEDE VER UN VIDEO ESCANEANDO EL CÓDIGO QR O VISITANDO:
VOOR MEER INFORMATIE EN BEGELEIDING KAN EEN VIDEO WORDEN BEKEKEN DOOR DE QR-CODE TE SCANNEN OF DOOR NAAR:
FOR YDERLIGERE INFORMATION OG VEJLEDNING KAN EN VIDEO SES VED AT SCANNE QR-KODEN ELLER BESØGE:

GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK/SUREGRIP-2

